

お知らせ

INFORMATION

No.2021-13
2021年3月

病体生理研究所

検査内容変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目において検査内容の変更の御案内をさせていただきます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【変更項目】

- ◆ β -リポ蛋白〔10032〕…検査案内 P.6 検査実施施設 M
- ◆ ループスアンチコアグラント…検査案内 P.100 検査実施施設 S

《変更日》 2021年3月31日（水）受付分より


【変更内容】

検査項目 〔コード〕 検査案内掲載頁 検査実施施設	変更箇所	新	従来	備考
β -リポ蛋白 (β -LP) 〔10032〕 P.6 M	検査方法 表記	比濁法	TIA	測定試薬販売中 止による試薬変 更
	基準値	169~586 mg/d L	230~650 mg/d L	
ループスアンチ コアグラント 〔62222〕 P.100 S	基準値	1.2 以下	1.3 未満	日本血栓止血学 会の推奨法であ る NormalizedRati oを使用し、同学 会の推奨基準値 と同等の基準値 を採用している 測定試薬へ変更 。
	報告範囲	0.1~99.9 (中和前凝固時間) 16.0 未満、 16.0~239.9、 240.0 以上 (秒) (中和後凝固時間) 6.0 未満、 6.0~120.9、 121.0 以上 (秒)	0.07 以下、 0.08~14.99、 15.00 以上 (中和前凝固時間) 10.0 以下、 10.1~149.9、 150.0 以上 (秒) (中和後凝固時間) 10.0 以下、 10.1~149.9、 150.0 以上 (秒)	

【β-リポ蛋白】

現行試薬の販売中止に伴い、別メーカーが販売する比濁法試薬に変更いたします。なお、新基準値は検査実施先従業員実測値です。

【新法と旧法の相関】

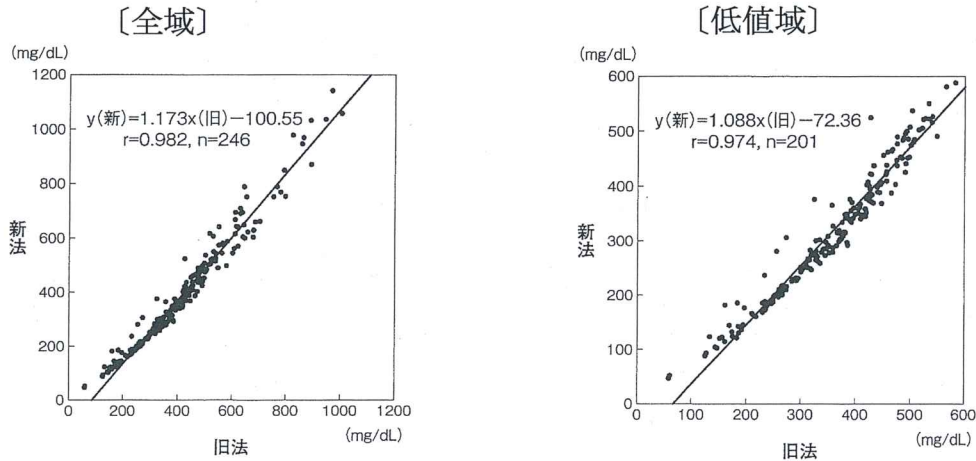

(LSI メディエンス社内検討データ)


参考文献：小出朝雄 他, 臨床病理 臨時増刊特集 (特 21) :82~91, 1975.

【ループスアンチコアグラント】

日本血栓止血学会の推奨法であるNormalized Ratioを使用し、同学会の推奨基準値と同等の基準値を採用している測定試薬へ変更いたします。

【新法と現法の相関】

◆ループスアンチコアグラント

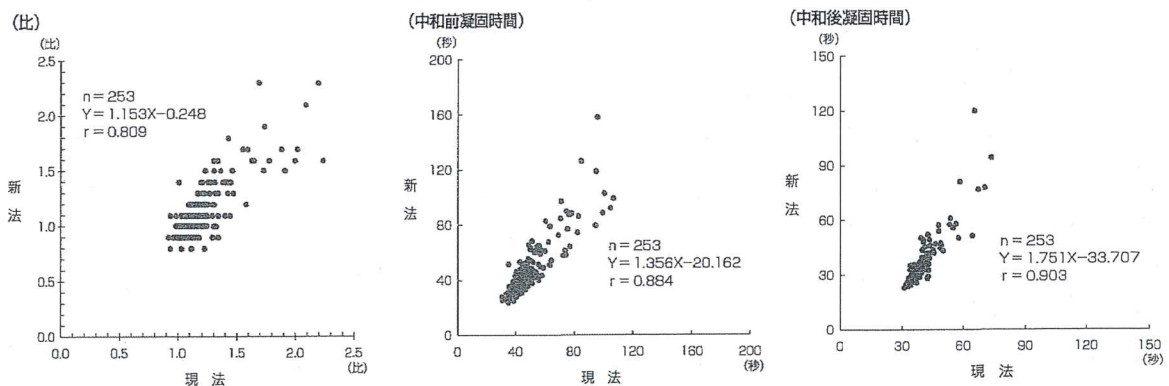

●相関一致表

		現法	
		陰性 (-)	陽性 (+)
新法	陰性 (-)	194	9
	陽性 (+)	16	34

判定一致率：90.1% n=253

検査方法参考文献：藤岡 貴：医学と薬学 73 (5) : 621~626, 2016.

以上