

お知らせ

INFORMATION



No.2015-02

2015年1月

病体生理研究所

検査内容の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用頂きまして誠に有り難うございます。

この度、下記項目につきまして、検査内容の変更をさせて頂くことになりましたので、ご案内致します。

何卒ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【検査内容の変更について】

- ◆ ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体 [15250]・・・P63
- ◆ 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 [14735]・・・P63


《変更日》2015年2月23日（月）受付分より

【検査内容変更について】

検査項目〔コード〕頁	変更箇所	新	従来	備考
ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体 〔15250〕 P63	名称変更	ヘリコバクター・ ピロリ抗体	ヘリコバクター・ ピロリ IgG 抗体	* 測定試薬の変更のため。 * 項目コード、基準値等 の変更はありません。 * ピロリ IgG 抗体のみの 測定でなく IgA 抗体 も含まれるため名称 変更を行います。
	必要量	0.5mL	0.2mL	
	検査方法	LA 法	EIA 法	
便中ヘリコバクター ・ピロリ抗原 〔14735〕 P63	検査方法	CLEIA 法	EIA 法	* 内部処理に伴う変更 のため。 * 項目コード、基準値等 の変更はありません。 * 従来容器での受付に ついて (※)
	容器	No.48 採取容器の変更を行います。		
	所要日数	2~3 日	3~6 日	


※ 変更日以降も従来容器での受付は可能ですが、従来法での測定・所要日数となりますので、早めの切り替えをお願い致します。

【容器変更】

新容器 No.48	便中ヘリコバクター ・ピロリ抗原	
--------------	---------------------	--

【関連資料】 (当研究所検討データ)

* ヘリコバクター・ピロリ抗体の相関

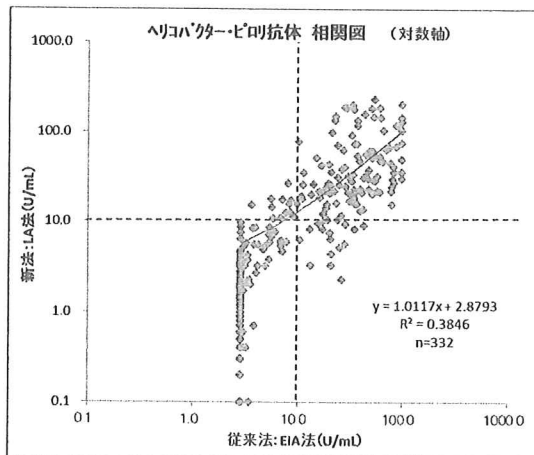

〈従来法との一致率〉

		従来法		
		陽性	陰性	合計
新 法	陽性	114	12	126
	陰性	16	190	206
	合計	130	202	332

合計一致率 91.6 %

陽性一致率 87.7 %

陰性一致率 94.1 %

以上